

## < 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の項目におきまして、試薬メーカーより感度の向上のため、製造工程の改良を行った旨の連絡がありましたのでご案内申し上げます。

この改良により、判定一致率は良好ですが、測定値は現行試薬と比較して約30%程度の高値となります。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえ、ご了承の程お願い申し上げます。


敬具

### 記

実施期日 平成 21年 1月 26日(月) 受付分より

変更項目 項目コード 475 ブタクサ(IgEシングルアレルゲン)  
総合検査案内記載頁 97~98

数値相関図 (メーカー資料)

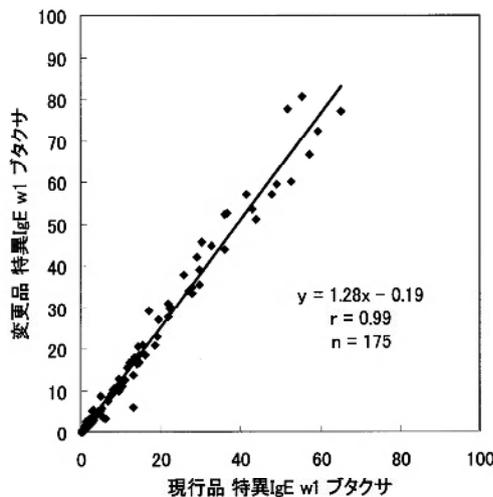

判定一致率: 99.5%

(n=182)

		現行品 特異 IgE w1 ブタクサ		
		陰性	疑陽性	陽性
変更品 特異 IgE w1 ブタクサ	陰性	55	0	0
	疑陽性	0	3	0
	陽性	0	1	123

クラス相関図(メーカー資料)

		現行品 特異 IgE w1 ブタクサ						
		0	1	2	3	4	5	6
変更品 特異 IgE w1 ブタクサ	6						3	4
	5					8	6	
	4				6	17		
	3			10	31			
	2		1	37	1			
	1		3					
	0	55						

n= 182

現行品 特異 IgE w1 ブタクサ